

Electric Field Medical Equipment

FA9001

電界医療機器



あなたの、クオリティ・オブ・ライフに

ビジネスをアグレッシブに。週末をアクティブに。そんなクオリティ・オブ・ライフは健康である限り、いつまでも続いていきます。今日も明日も、健康に自信がもてる。でも、そのためには、少し自己管理も必要です。身体の中から辛い症状を治療する電界療法は、毎日無理なく実践できる物理療法。いつでも気軽に利用できて、操作も簡単です。身体自体がもつ、健康を保とうとする能力を維持して快適な毎日を送りませんか。




Electric Field Medical Equipment

電界医療機器

認証番号 第222AKBZX00152000号

FA9001

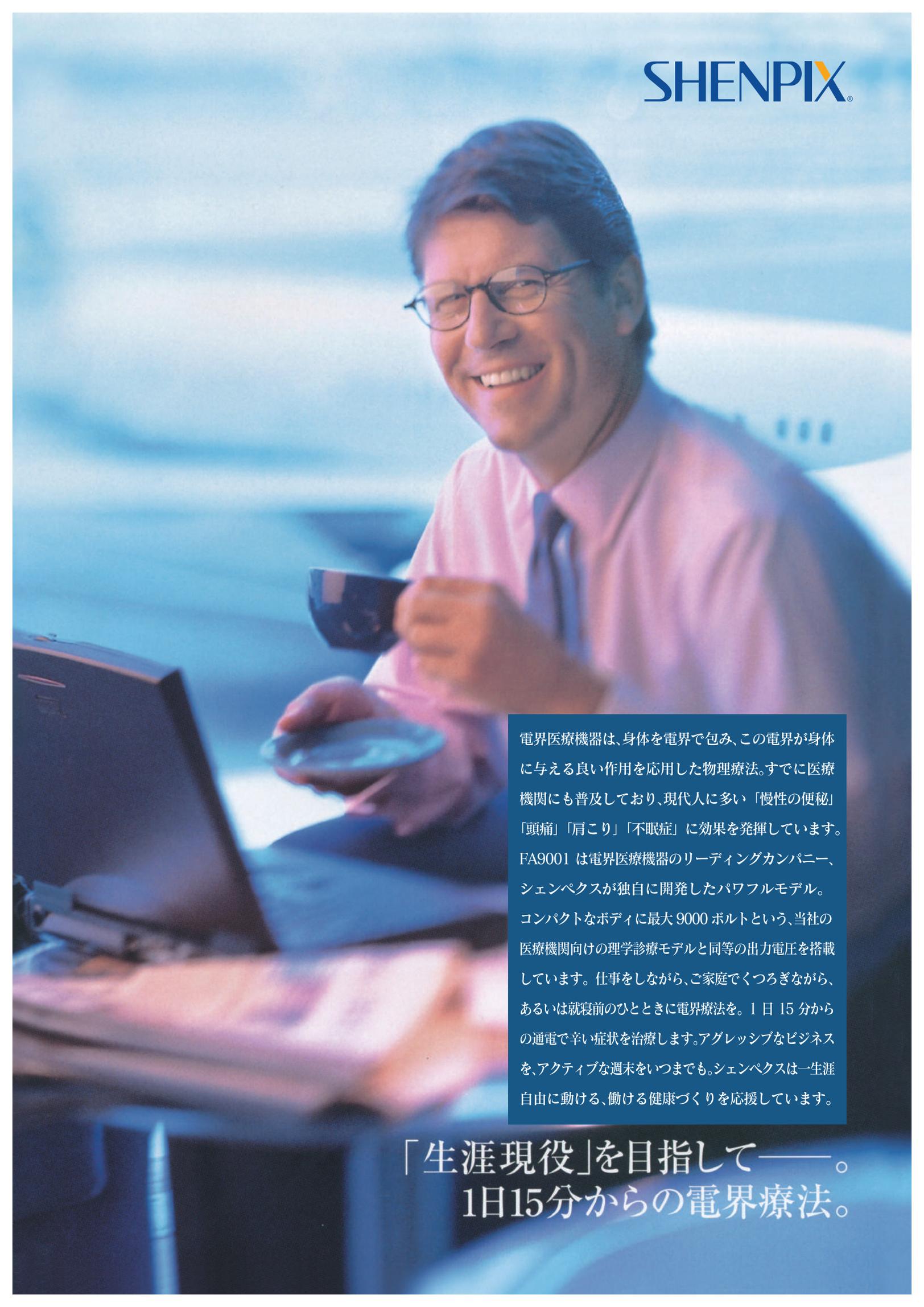

SHENPIX®

電界医療機器は、身体を電界で包み、この電界が身体に与える良い作用を応用した物理療法。すでに医療機関にも普及しており、現代人に多い「慢性の便秘」「頭痛」「肩こり」「不眠症」に効果を発揮しています。FA9001 は電界医療機器のリーディングカンパニー、シェンペクスが独自に開発したパワフルモデル。コンパクトなボディに最大 9000 ボルトという、当社の医療機関向けの理学診療モデルと同等の出力電圧を搭載しています。仕事をしながら、ご家庭でくつろぎながら、あるいは就寝前のひとときに電界療法を。1日15分からの通電で辛い症状を治療します。アグレッシブなビジネスを、アクティブな週末をいつまでも。シェンペクスは一生涯自由に動ける、働ける健康づくりを応援しています。

「生涯現役」を目指して——。
1日15分からの電界療法。

身体の中から治療する、 電界療法。

健康を損なってから治療する西洋医学に対し、電界療法は、健康に深刻な異常をきたす前に、症状を積極的に治療する物理療法。身体の中から全身に働きかけて症状を治療します。FA9001は、厚生労働省から効能効果の承認を受けた電界医療機器。性能、品質、安全性のすべての面で、リーディングカンパニー、シェンペックスのクオリティが、そのコンパクトなボディの中に反映されています。

産学協同の実践
アカデミック・
マーケティング
Academic Marketing

シェンペックスは学術・研究・医療機関と協同して、新たな電界医療機器の開発や臨床試験などを行い、理論と実践を相互フィードバックするアカデミック・マーケティングを展開。

電界医療機器 FA9001

Electric Field Medical
Equipment

電界医療機器とは、電界が身体に与える良い作用を応用した機器。FA9001は、最大9000ボルトという当社の医療機関用モデルと同じ出力電圧で、身体の周囲に電界空間を生みだします。

身体にやさしい 電界療法

Electric Field Therapy

安全な高圧交流電位が創りだす電界空間が全身を包み込んで、身体の内側から働きかけます。ほとんど電流は流れませんので、ビリビリするような刺激もありません。

承認効能効果

Effects

慢性の便秘

{ 腸がイキイキ }

肩こり

{ 肩、らくらく }

不眠症

{ 夜はぐっすり }


頭痛

{ 頭スッキリ }

体表面電界強度分布

「電界医療機器」使用時の体表面に加わる電界強度の分布。

〈研究協力: 北海道大学大学院工学研究科〉

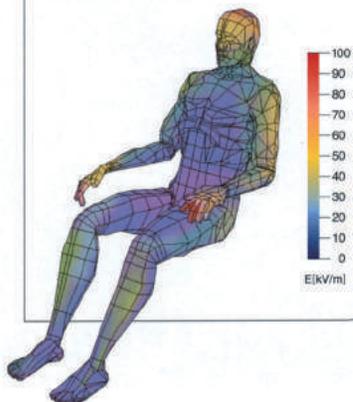

さあ始めましょう、
電界療法習慣。

On & Off



いつまでもあなたのクオリティ・オブ・
ライフをエンジョイしてほしいから、
電界医療機器FA9001で通電を。
全身通電、集中通電、ローラー通電
の3つの方法で、現代人を悩ませる
辛い症状をスッキリ解消します。

Resorts

慢性の便秘を
解消して、
気分も晴れ晴れ。

On &
Off

At Any Time

頭痛スッキリ。
ウィークデイも
パワフルに。



家事の合間にホームセラピー。

食生活の乱れや運動不足などによる、慢性の便秘は、イライラや肥満の原因ともなります。毎日 15 分からの通電で便秘の解消。お腹がスッキリすると、気分まで爽快になって、楽しい毎日を過ごせます。

◎ソファなどでも使える「通電シート」。

座っているだけで治療できるので、雑誌を見たり、お茶をいただいたりしながら通電が行えます。



気軽に実践できる電界療法。

迅速かつ的確な意思決定が求められるビジネスの世界。頭痛に悩まされている、その判断も鈍りがちです。FA9001 で、日常の業務を遂行しながら電界療法を。15 分でも十分効果を発揮します。

◎椅子などに座って全身通電を行うには「通電シート」が最適です。腰掛け部分に通電シートを広げてご使用ください。



Business Trips

肩こりを
やさしくほぐして、
ハードワークもクリア。



二極の同時通電で集中療法。

パソコンなどで同じ姿勢を長時間続けていると、筋肉がこわばって肩こりがおこりやすくなります。そんな時は、二つの電極によるパワフルな同時通電を。業界初の集中通電シートが肩こりを効果的に治療します。



◎肩を集中的に通電する場合は、「集中通電シート」をたすき掛けに装着すると、フィット感と安定感が高まります。

Leisure

不眠症と
サヨナラして、
爽やかに早起き。



就寝前や就寝中の通電で、 爽快な朝を。

寝つきが悪かったり、眠りが浅いと朝がつらいだけでなく、一日中ぼんやりしてしまいます。ベッドで横になって行える全身通電は、不眠症の治療にも効果的。毎朝スッキリ目覚めて、週末もアクティブに。

◎就寝前のリラックスタイムに、いつものベッドで通電できる「通電シート」。臀部や腰部に当たるように広げてください。



Coffee Breaks

忙しいなかにも
心地よい
メリハリを。

On &
Off

Everyday Life

自然に身につく、
毎日の電界療法。



ローラー通電で、
スピーディに治療。

ランチタイムや仕事の合間を利用しながら手軽に治療するなら、電子ローラーが最適です。突起状の先端部ではピンポイントで、側面のローラー部では、ローリングしながらの通電が可能です。肩や腰、膝など、気になる部分に効率よく通電できます。

◎「電子ローラー」でローラー通電する場合は、先端部を治療部位に押し当てます。周辺部には、側面のローラーを転がしてご使用ください。

オプション部品



機械は苦手という
お年寄りにも操作が簡単。

FA9001 はシンプルな表示パネルとリモコン操作で使い方も簡単、らくらく。機械が苦手な方やお高齢の方も安心してお使いいただけます。テレビを見ながら、おしゃべりしながら、気軽に通電できる電界療法は、毎日の習慣にすると効果的です。

◎シンプルでわかりやすいリモコン。出力電圧、出力波、通電時間をそれぞれワンボタンで設定できるので簡単です。



Business Negotiations

重要な場面こそ
大胆かつ
アグレッシブに。



足元から効率よく全身通電。

大きな取引を成功へと導く大切な商談。ここ一番という場面には、心身共に快適な状態で臨みたいもの。イスにかけたまま足元から全身通電できる通電プレートなら、会社でもご家庭でも気軽に使えてとても便利です。

◎オプション（別売）の「通電プレート」は、椅子などに腰掛けて通電を行うときに使いやすいよう開発されたものです。

オプション部品



Relaxation

くつろぎの
時間を
グレードアップ。



午後のひととときに、
ブレイクタイム・ヒーリング。

ソファや椅子に座って、またはベッドに横たわって使える通電シート。本体もコンパクトなので、コンセントのあるお部屋ならどこでも電界療法を行えます。リビングで映画や読書を楽しみながら気軽に治療できます。

◎横になった姿勢で全身通電を行う場合には、ソファやベッドなどに「通電シート」を広げてご使用ください。



Simple Operation

パワフル出力を コンパクト設計で!



出力波と出力電圧の組み合わせで、9種類の全身通電と3種類の部分通電の計12種類もの多様な出力パターンを実現。独自のパワフル出力機構による瞬間的な高出力で、最大限の治療効果を発揮します。電流はほとんど流れないので、ビリッとするような刺激もありません。省スペース設計で設置場所を選ばず、15分からの使用で十分な効果が得られます。

《本体》

- **開始 / 停止表示**
通電中にはランプが点灯。一時停止中は点滅します。
- **経過時間表示**
経過時間1分ごとに表示されます。一時停止中は数字が点滅します。
- **出力波表示**
3種類の出力波で治療効果を高めめます。
- **時間設定**
15分、30分、60分の時間設定が可能です。
- **全身 / 集中出力電圧表示**
3500V・7000V・9000Vから選んで全身治療。
- **ローラー出力電圧表示**
1200V・1500V・2000Vから選んでローラー治療。
- **主電源スイッチ**
押しとランプが点灯。再び押しと消灯します。
- **表示画面明るさスイッチ**
表示画面の明るさは強・弱の2段階。
- **全身 / 集中・ローラー切換スイッチ**
ワンタッチでラクラク切換。
- **全身 / 集中高圧出力口**
高圧コードを接続します。
- **ローラー高圧出力口**
電子ローラーのコードを接続します。

仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
出力電圧	3500V・7000V・9000V
ローラー出力電圧	1200V・1500V・2000V
消費電力	13W
外形寸法	幅130×奥行297×高さ406(mm)
総質量	8.3kg

《リモコン》

全身 / 集中電圧選択ボタン

出力波選択ボタン

時間選択ボタン

一時停止ボタン

全身 / 集中通電ボタン

ローラー電圧選択ボタン

ローラー通電ボタン



ワンタッチ操作で快適通電。

操作パネルは、シンプル・レイアウトの親切設計を重視しています。全身 / 集中・ローラーの通電切替もワンタッチ選択。出力波や出力電圧など、ボタンを選んで押すだけの簡単操作です。もちろん、便利なタイマー機能も装備しました。好みの姿勢でくつろぎながらワイヤレスリモコンで、各種操作のセッティングが行えます。

保証期間

本体 3年 / 付属品 1年

保証書、取扱説明書は記載内容を十分にご確認のうえ、大切に保管してください。

※本製品の仕様・デザインは改良により、予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。※分割払いもご利用できます。※商品写真は印刷のため、実際の色とは多少異なる場合があります。

シェンパックスの品質と安全に対する姿勢です。

厚生労働省の認可製品であるFA9001は、グローバル・スタンダードに基づく品質システムのもと、国や業界団体発行の信頼性ある認証を取得しています。



医療機器の品質保証国際規格

ISO13485

電界医療機器の設計・開発・製造及び据付について「ISO13485」の認証を取得しています。



経済産業省

PSEマーク

経済産業省の「電気用品安全法」で規定された技術基準に適合。製品の安全性が認められています。



(財)電気安全環境研究所

JET認証マーク

JETによる製品試験および製造工場検査、定期工場検査に合格しています。



(社)日本ホームヘルス機器協会

HAPIマーク

業界団体が定めた業界基準に合格。生産物賠償責任保険(PL保険)が付保されています。

付属品

リモコン FA9001 (単4電池2個)
使用範囲は本体より直線で5メートル以内です。

電界式検電器 (単4電池2個)
絶縁・通電・電界強度の確認に使用します。

通電シートB
全身通電をする場合に使用します。

通電シートカバーS
通電シートを保護します。

絶縁シートF
通電中に人体から高電圧が漏れないよう絶縁します。

ベッド絶縁 ゴム板(6個)

電源コード
本体装置と家庭用コンセントを接続します。

高圧コードF
通電シートと本体を接続します。

コードリフターF(6個)
通電中の振動音を防ぐために高圧コードを床から浮かせます。

集中通電シート (FAE-21)
2つの電極による同時通電で集中治療が行えます。

集中通電シートカバーS (SHE-22S)
集中通電シートを保護します。

本体カバーF
本体に上からかぶせてご使用ください。

オプション部品

電子ローラーF
首筋・肩・腰など、ピンポイント通電に使用します。
標準価格 4,800円 (税別)

通電プレートSセット
椅子等に腰掛けて足元から通電いただけます。
通電プレートSと絶縁パッド(4個)
コードリフター(6個)のセットです。
標準価格 48,000円 (税別)

通電反応について

電界医療機器をはじめお使いになる方、使用中の方、あるいは長期使用しないで、再び使いはじめる方には、体質や体調、または食事の内容などにより、まれに頭痛、だるさ、かゆみ等の症状が現れる場合があります。このような症状を通電反応といい、通常は2、3日以内でなくなるものです。このような場合は、使用時間を短くしたり、1〜2日使用を中断してからご使用ください。それでも症状が治らない場合は、他の病気の症状を示していることがありますので、医師にご相談ください。

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

安全のために必ずお守りください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う危険が差し迫って生じることが想定されます。

危険



※次のような医用電気機器との併用は、誤作動を招く影響を与える恐れがあるので使用しないでください。

- ①ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器
- ②心電計などの装着形の医用電気機器

※心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は使用しないでください。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定されます。

注意



※身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。

※薄子が濡れている場合には、使用しないでください。

軽い刺激を受けることもあり、思わぬ事故の原因となることがあります。

※治療中の人に外部の人は触れないでください。

軽い刺激を受けることもあり、思わぬ事故の原因となることがあります。

※次の人は、使用前に医師に相談してください。

- ①悪性腫瘍のある人
- ②心臓に障害のある人
- ③妊娠初期の不安定期又は出産直後の人
- ④体温38℃以上(有熱期)の人
- ⑤急性炎症症状[倦怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期にある人
- ⑥衰弱している人
- ⑦安静を必要とする人
- ⑧脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人
- ⑨糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- ⑩温度感覚喪失が認められる人(電熱装置をもつ機器に限る)



株式会社ウエルアップ

〒220-0004

横浜市西区北幸 2-1-22 ナガオカビル 4F

TEL : 045-317-7908 / FAX : 045-317-7909

URL : <http://wellup.jp>

ご注文・お問い合わせは