




BodyChecker NEO


こころとカラダのバロメーター
「ストレスチェック」&「血流状態」で
心身のセルフケア

BodyChecker NEO

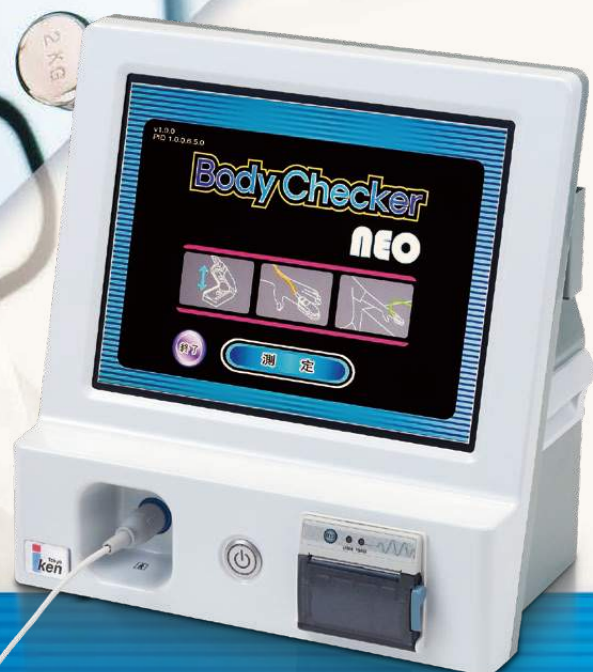

特 徴

- 左手指先のみでストレス度&血管年齢の同時測定が可能
- 新設計人差し指センサーで測定はラク
- 会員カード使用にて簡便測定 -----
- 測定データはシステムにて集計・管理
- プリンター標準装備（サーマルプリンターでプリントアウト可能）
- 場所をとらないコンパクト設計
- 日本語と英語に対応

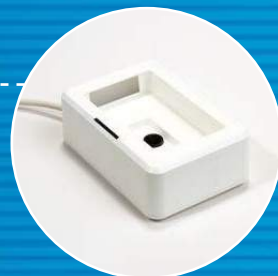

会員専用カードリーダー

●ストレス測定

ストレスが多いと自律神経系機能低下により心拍間変異が減少し、ストレス性心疾患の危険度が高くなります。心拍間変異 (HRV: Heart Rate Variability) を測定し、自律神経状態と均衡度からストレス度合いを評価します。

●末梢血液循環測定（血管年齢測定）

指先で脈波を測定し、動脈血管弾性度、末梢血管弾性度から末梢血液循環状態を測定します。測定結果から血管老化度を7段階で評価します。

●ストレス測定結果

身体的ストレス度、精神的ストレス度、ストレス対処能力、疲労度、心臓安定度、交感神経・副交感神経の均衡状態を数値とグラフで表示し、結果をコメント表示します。

このような症状がある方に

測定をお勧めします。



ストレス測定



末梢血液循環測定 (血管年齢測定)




末梢血液循環測定結果

脈波、加速度脈波、動脈血管弾性度、末梢血管弾性度を数値とグラフで表示し、血管段階を7区分、血管年齢と結果をコメント表示します。

結果印刷

測定結果は、内蔵サーマルプリンターから印刷できます。

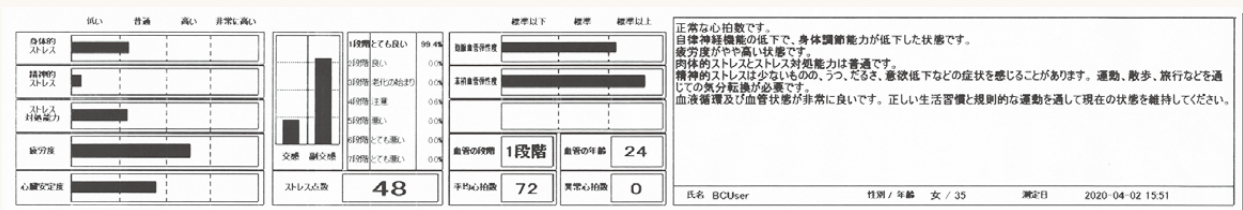

このような施設で使用されています。

- ① 病院、クリニック
- ② 接骨院、鍼灸院など
- ③ ストレスの多い職場
- ④ 学校、官公庁、保険会社、企業体などの医務室
- ⑤ スポーツセンター、ヘルスケアセンターなどのリラクゼーション施設

BodyChecker NEO



会員専用カードリーダー
(※オプション)

項 目		内 容
販売名		ボディーチェッカーNEO
一般的名称		脈波計
医療機器品目番号		13B1X10074000014
医療機器分類		一般医療機器(クラスI) 特定保守管理医療機器
電気定格		AC100V 1.2A 50/60Hz
本体定格		DC12V 8.33A 100W
保護の形式		クラスI機器
寸法・重量(本体)		幅324mm×奥行212mm×高さ335mm・5.5kg
システム	OS	Windows 10
	CPU	Intel Atom Processor 1.44GHz
	メインメモリ	2GB
表示方式		12インチTF Tカラー液晶・Touch Screen
プリンター		Therma Iプリンター

Tokyo ken 東京医研株式会社
URL <https://www.tokyoiken.co.jp>

本社/総務部・技術部	〒206-0802 東京都稲城市東長沼1131-1	TEL 042-378-6630
営業部	〒113-0034 東京都文京区湯島2-27-2	TEL 03-5807-3011
仙台支店	〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-28-22-B1F	TEL 022-773-3060
埼玉支店	〒337-0033 埼玉県さいたま市見沼区御蔵809-20	TEL 048-615-0800
東京支店	〒113-0034 東京都文京区湯島2-27-2	TEL 03-5807-3013
西東京支店	〒183-0005 東京都府中市若松町4-3-6	TEL 042-352-3055
横浜支店	〒221-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉4-3-17	TEL 045-413-5103
名古屋支店	〒465-0014 愛知県名古屋市中東区上菅2-1108-3F	TEL 052-726-8971
大阪支店	〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-2-9 翁ビル2F	TEL 06-7223-8971
広島支店	〒731-0124 広島県広島市安佐南区大町東2-14-30	TEL 082-831-3616
四国支店	〒761-1703 香川県高松市香川町浅野332	TEL 087-815-5155
福岡支店	〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代4-29-27・6F	TEL 092-642-7288

お問い合わせ先

Wellup

株式会社ウエルアップ

〒220-0004

横浜市西区北幸2-1-22 ナガオカビル 4F

TEL : 045-317-7908 / FAX : 045-317-7909

URL : <http://wellup.jp>