

酸素不足時代
毎日30分の
酸素タイムが
重要です。



酸素サーバー酸素濃縮器 CFOC-F



人間は酸素を利用して生命活動を維持しています。食物の分解、60兆個といわれる細胞のエネルギー産生、食品添加物など毒物の分解無毒化、ウイルスや菌の退治、コラーゲンやタンパク質など必要物質の生成など…。生命活動のほとんどが「酸素を利用した化学反応」です。酸素不足の不完全な化学反応は不健康です。そして酸素の最大の特徴は「即効性」です。



構成図

酸素サーバー酸素濃縮器
CFOC-F


製品仕様

酸素流量	毎分1~5リットル
濃縮酸素濃度	95.5%~87%
最大出力圧力	45kPa±4.5kPa
騒音	55dB (A)以下
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	400VA (500W)
本体重量	26.5kg
本体サイズ	高さ71.2cm×幅28.5cm×奥行54.5cm
付属品	CO2 Free Mask×2
耐用使用時間	8,000時間



世界初の専用酸素マスクをご使用ください

CO2 Free Mask

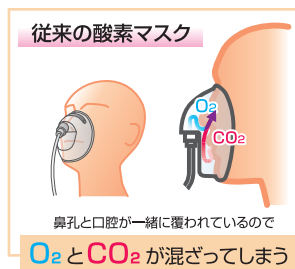

マスク内部で鼻(吸気=酸素)部分と口(排気=二酸化炭素)を仕切る事によって、吸気と呼気が混ざらない新しいタイプの酸素マスク。深呼吸のように鼻で吸って口で吐くという普通の呼吸で呼気に含まれる高濃度二酸化炭素を再摂取することはありません。

また、吸気と呼気が混ざらないためマスク内の酸素濃度は従来型酸素マスクに比べ30%ほどアップします。マスク下部を開放していますのでマスク使用時の会話に不自由を感じません。カニューラを使用している方も是非、CO2 Free Maskをお試しください。

弊社が開発し医療機器の認証を得た **[New Oxygen Mask]**、非医療用 **[CO2 Free Mask]**。

この酸素マスクは構造的な意匠登録を日本、アメリカ、EU28ヶ国、中国、台湾、韓国などで取得しています。

※いずれも構造は同じです。

特徴

- ①従来の酸素マスク内部の鼻と口部分に仕切りを入れ、吸気(酸素)と呼気(二酸化炭素)が混ざらないようにしました。この結果、濃縮酸素を取り入れる鼻部分の容積が適度になり、濃縮酸素の拡散も低下し高濃度のままの酸素が吸引できるようになりました。
- ②マスク下部を大きく開放し、呼気をマスク外部に排気できるようにしました。
- ③マスク内部に濃縮酸素を送り込むコネクタの濃縮酸素吹き出し口を鼻孔方向に向けることで、効果的に濃縮酸素を鼻孔に送り込むことができます。

※酸素マスクは個人専用のマスクが必要です。何度も繰り返し使用が可能です。

OPTION

アロマ専用シリンダー

シリンダー内にお好みのアロマビーズを入れることで、アロマ効果も得ることができます。



※専用アロマビーズもご用意致しております。詳しくはお問い合わせください。

COIN TIMER

業務用として木枠とタイマーがセットとなっております。コインタイマーは100円玉専用で時間設定は1~199分まで可能です。



Wellup

株式会社ウエルアップ

〒220-0004

横浜市西区北幸 2-1-22 ナガオカビル 4F

TEL : 045-317-7908 / FAX : 045-317-7909

URL : <http://wellup.jp>

取扱店