

TANITA

健康をはかる

体組成計

DC-13C

非検定品

取引証明以外用

簡単・速い!

靴のまま体組成を測定可能

店舗や企業、イベント会場での測定にお勧め

- 全身の体組成を約10秒で測定可能。
- 両手間のインピーダンスから全身の体組成を評価。
- 測定結果は内蔵プリンターから印刷可能。
- USBポート・RS-232Cポートを標準装備、外部入出力が可能。
- 測定データを自動でSDカード(別売)にCSV保存。



靴を脱がずに
両手で握るだけ



Made in Japan 日本製

DC-13C 主な特長



グリップは180度回転



靴のままはかれるので実測時間が早い(全身の体組成が約10秒)



1人でも測定可能なわかりやすい操作部、測定結果は内蔵プリンターで印刷可能



SDカード(別売)に測定データを保存可能

USBポート・RS-232Cポートが標準装備で外部入出力可能

企業内での社員の健康管理、自治体やイベントでの測定に



プリントアウト例

TANITA	
DC-13C	
2018/04/01 (日) 10:10	
氏名	
入力項目	0000000000000001
ID	スタンダード
性別	男性
年齢	37才
身長	170.3 cm
体重	71.0 kg
測定結果	
体重	71.0 kg
体脂肪率	12.8 %
脂肪量	9.0 kg
除脂肪量	62.0 kg
筋肉量	57.7 kg
筋肉率	82.7 %
体水分量	45.8 kg
体水分率	64.5 %
推定骨量	3.2 kg
基礎代謝量	1693 kcal
内臓脂肪レベル	7
BMI	24.1
標準体重	63.8 kg
肥満度	9.4 %
目標設定	
目標体脂肪率	11.0 ~ 21.9 %
目標体重	7.5 ~ 17.1 kg
目標体脂肪率	
目標体脂肪率	2.0 %
体脂肪率	
やせ 標準 軽肥満 肥満	
BMI	
やせ 標準 肥満1 肥満2	
内臓脂肪レベル	
標準 やや過剰 過剰	
筋肉量	
少 平均 多	
基礎代謝レベル	
燃えにくい 標準 燃えやすい	
体脂肪率と筋肉量による体型判定	
★筋肉質★	
インピーダンス情報	
* 6.25kHz 50kHz	
577.9 497.5 R	
-34.1 -51.0 X	

仕様

インピーダンス測定部	測定方法	デュアル周波数4電極BIA法(両手式)
	測定周波数	6.25kHz, 50kHz
	測定電流	500μA以下
	電極材質	ABSメッキ
	測定部位	全身
	測定範囲	150.0~1500.0Ω(0.1Ω単位)
体重測定部	ひょう量(最大計量)	200kg(風袋量を含む)
	目量(最小表示)	2.0~100.0kgまで0.1kg、100.0~200.0kgまで0.2kg
表示部		セグメントLCD
外部インターフェイス		RS-232C、USB、SDメモリーカードスロット
電源		ACアダプター(12V)
消費電流		0.3A以下
使用条件	温度範囲	5~35℃
	湿度範囲	30~80%(結露なきこと)
主な付属品		マット3枚、組み立てガイド、電源コード、ACアダプター、操作手順ガイド、プリンター用紙1巻
製造国		日本
メーカー希望小売価格		¥285,000(税抜)

専用プリンター用紙4巻セット

品番	2903
メーカー希望小売価格	¥3,000(税抜)

交換用マット(10枚入り)

品番	OP-600
メーカー希望小売価格	¥6,000(税抜)


測定モード別仕様

		体組成計モード	体重計モード
入力項目	着衣量(風袋引き量)	0.0~10.0kg(0.1kg単位)	○
	ID	0~9999999999999999(16桁)	○
	体型	スタンダード / アスリート	—
	性別	男性 / 女性	—
	年齢	6~99才(スタンダード)/18~99才(アスリート)	—
	身長	90.0~249.9cm	—
	目標体脂肪率	4~55%(1%単位)	—
出力項目 ※プリントアウト項目は選択可能	体重	2.0~100.0kg(0.1kg単位) 100.0~200.0kg(0.2kg単位)	○
	体脂肪率	3.0~75.0%(0.1%単位)	—
	脂肪量	0.1kg単位	—
	除脂肪量	0.1kg単位	—
	筋肉量	0.1kg単位	—
	筋肉率	0.1%単位	—
	体水分量	0.1kg単位	—
	体水分率	0.1%単位	—
	推定骨量	0.1kg単位	—
	基礎代謝量※1	0~9999kcal/日(1kcal/日単位)	—
	内臓脂肪レベル※1	1~59レベル	—
	BMI	0.1単位	—
	ローレル指数(17才以下)	0.1単位	—
	標準体重※1	0.1kg単位	—
	肥満度※1	0.1単位	—
判定/グラフ	体脂肪率/BMI※1/内臓脂肪レベル※1/筋肉量※1/基礎代謝レベル※1/体型判定※1	—	—
	リアクタンس、レジスタンス	—	—

※1 17才以下で測定した場合、この項目は、表示、プリントアウト、出力されません。
※2 測定結果は参考値としてご使用ください。

寸法図(単位:mm)

質量:約12kg
ACアダプターケーブル長さ:約3.4m

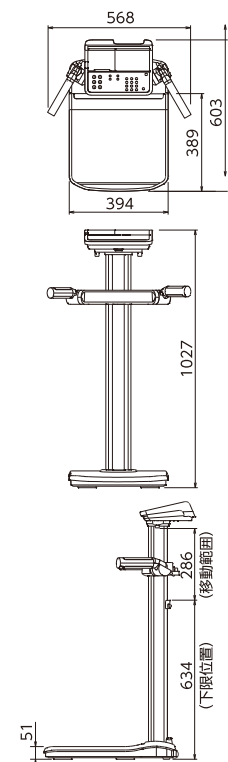

※寸法は概略です。

株式会社 **タニタ**

本 社 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	03(3558)8111(代表)	FAX03(3558)0335
大阪営業所	〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-3-15	06(6784)2811(代表)	FAX06(6784)2778
名古屋営業所	〒465-0072 愛知県名古屋市中区東区原2-707	052(704)2201(代表)	FAX052(704)2221
福岡営業所	〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-2-6	092(575)5761(代表)	FAX092(575)5617
北日本営業所	〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8	022(299)7161(代表)	FAX022(299)7163

(株)タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1 0187(66)2122(代表)

お客様サービス相談室〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ナビダイヤル(有料) ☎0570-099655 受付時間9:00~18:00(祝日を除く~金)

©2019 TANITA Corporation.

(株)タニタ本社・東京営業所・大阪営業所・(株)タニタ秋田は、ISO9001の認証登録事業所です。

<http://www.tanita.co.jp>

◎表示価格をはじめ、このカタログの内容は2019年2月現在のもので、◎商品のデザイン・仕様・価格に変更になることもありますのでご了承ください。
◎商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。